

Instrukcja przygotowania **5% stężenia roztworu** gotowego do użycia z koncentratu **VIRUSOLVE+** do mycia i dezynfekcji sporobójczej wysokiego poziomu powierzchni

1

Do butelki na roztwór roboczy nalej odpowiednio odmierzoną ilość wody:


- Aby uzyskać 500 ml (0,5L) roztworu roboczego nalej 475 ml (0,475 L) wody
- Aby uzyskać 750 ml (0,75 L) roztworu roboczego nalej 712,5 ml (0,7125 L) wody
- Aby uzyskać 1000 ml (1L) roztworu roboczego nalej 950 ml (0,950 L) wody



2

W celu uzyskania 5% stężenia roztworu gotowego do użycia, odmierzoną ilość koncentratu Virusolve+ wlej do wcześniej odmierzonej ilości wody:

- Aby uzyskać 500 ml (0,5 L) roztworu roboczego wlej 25 ml koncentratu
- Aby uzyskać 750 ml (0,75 L) roztworu roboczego wlej 37,5 ml koncentratu
- Aby uzyskać 1000 ml (1 L) roztworu roboczego wlej 50 ml koncentratu

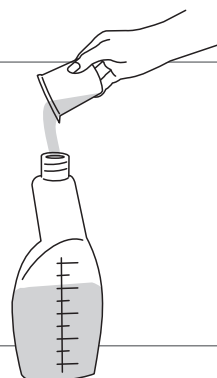

3


Wymieszaj roztwór.

Przygotowany roztwór jest gotowy do użycia.

Koncentrat zmieszany z wodą (niezanieczyszczany), jest aktywny tak długo, jak termin ważności koncentratu, z którego został przygotowany.

Butelka powinna być opisana m.in.:

- data przygotowania roztworu
- data ważności
- nr serii
- dane osoby, która przygotowała roztwór roboczy

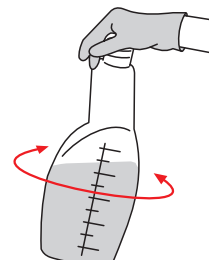

Roztwór 2,5%	Objętość roztworu	Roztwór 5,0%
12,5 ml konc. + 487,5 ml wody	0,5 litra	25,0 ml konc. + 475 ml wody
25,0 ml konc. + 975 ml wody	1,0 litr	50,0 ml konc. + 0,95 l wody
50,0 ml konc. + 1,95 l wody	2,0 litry	100,0 ml konc. + 1,9 l wody
75,0 ml konc. + 2,925 l wody	3,0 litry	150,0 ml konc. + 2,85 l wody
100,0 ml konc. + 3,9 l wody	4,0 litry	200,0 ml konc. + 3,8 l wody
125,0 ml konc. + 4,875 l wody	5,0 litrów	250,0 ml konc. + 4,75 l wody
250,0 ml konc. + 9,750 l wody	10,0 litrów	500,0 ml konc. + 9,5 l wody

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz z ulotką informacyjną